

# MS Bench (G) SCI 2

Artikelnummer: 3302770



## Beschreibung

Die exklusiv für SCIEX entwickelte MS Bench SCI 2-Reihe bietet eine modulare Workstation mit integrierter Gaserzeugung oder einem geräuschkämpfenden Gehäuse für Schrupppumpen. MS Bench SCI 2 wurde speziell für die Verwendung mit dem LC-MS / MS-System SCIEX Triple Quad™ 7500 entwickelt - QTRAP® Ready. Es stehen zwei Varianten des MS Bench SCI 2 zur Verfügung. MS Bench (G) SCI 2 verfügt über einen in sich geschlossenen Gasgenerator, der eine zuverlässige und kostengünstige Quelle sowohl für Stickstoff (Curtain Gas™) als auch für saubere, trockene, ölfreie Luft für Quell- und Abgas bei Strömen und Drücken bietet, die für SCIEX konfiguriert sind 7500 Systemanforderungen. Die andere Variante, die MS Bench SCI 2, wird ohne Gasgenerator geliefert und bietet stattdessen ein Fach unter der Bank, in dem bis zu zwei MS-Schrupppumpen untergebracht werden können.




## Generator Details

- **Gasarten:** Stickstoff, Null-Luft
- **Integrierter Kompressor:** Ja

## Hauptmerkmale

- Wurde exklusiv für SCIEX entwickelt, um eine modulare Banklösung für das SCIEX Triple Quad™ 7500 LC-MS / MS-System bereitzustellen - QTRAP® Ready
- "Genius Inside": echter Plug & amp; Spielgaserzeugung
- Keine externe Druckluftquelle erforderlich
- Rauschen & amp; Schwingungsdämpfung, geeignet zur Verwendung als Instrumentenbank
- Lüfterunterstützte Kühlung für Vakuumpumpen
- Reklassierentlüftung verhindert interne Kondensation (nur MS Bench (G) SCI 2)
- CSA / FCC / CE-konform
- Arbeitsplatte aus chemikalienbeständigem Phenolharz
- Nivellierrollen für eine nahtlose Installation mit dem vorhandenen Labortischsystem

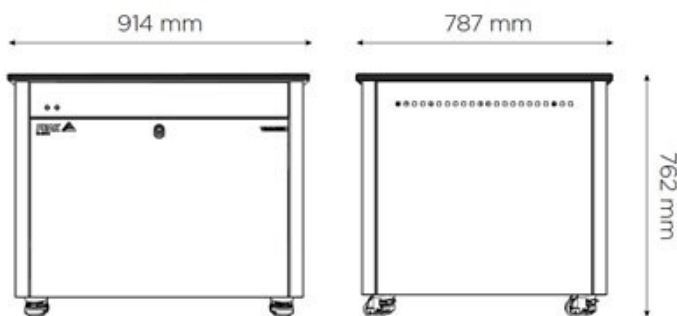

## Technische Spezifikationen

|                              | MS Bench (G) SCI 2  |
|------------------------------|---------------------|
| Gasart                       | Stickstoff          |
| Maximaler Gasfluss:          | 26*L/min            |
| Max. Ausgangsdruck:          | 60psi/4,1bar        |
| Gasart                       | Null-Luft           |
| Maximaler Gasfluss:          | 26*L/min            |
| Max. Ausgangsdruck:          | 105psi/7,2bar       |
| Gasart                       | Null-Luft           |
| Maximaler Gasfluss:          | 25*L/min            |
| Max. Ausgangsdruck:          | 70psi/4,8bar        |
| Max. Ausgangsdruck:          | 60psi/4,1bar        |
| Energieverbrauch:            | 1,800VA             |
| Stromspannung:               | 220 - 240v ±10%     |
| Frequenz:                    | 50/60 Hz            |
| Strom:                       | 7 A                 |
| Wärmeabgabe:                 | 3753 BTU/hr         |
| Maximale Betriebstemperatur: | 30°C / 86°F         |
| Partikel:                    | <0.01µm             |
| Lärmpegel:                   | 60                  |
| Akkreditierungen:            | CE, FCC, CSA        |
| Größe (HxBxT) mm             | 762 x 914 x 787 mm  |
| Größe (HxBxT) Zoll           | 30 x 36 x 31 inches |
| Gewicht des Generators       | 160kg / 352lbs      |

<sup>^</sup>HINWEIS – Diese Leistungsmerkmale gelten nur in Verbindung mit einer zugelassenen Sciex-Anwendung. Eine Liste der unterstützten Produkte finden Sie in der aktuellen Anwendungsmatrix.

## [**PEAK** Protected]<sup>TM</sup>

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: [www.peakscientific.com/ordering/](http://www.peakscientific.com/ordering/)
- For service plans visit: [www.peakscientific.com/service/service-plans/](http://www.peakscientific.com/service/service-plans/)

**Peak Scientific UK**  
Tel: +44 (0)141 812 8100  
Fax: +44 (0)141 812 8200

**Peak Scientific North America**  
Tel: +1-800-767-6532  
Fax: +1-978-608-9503

**Peak Scientific China**  
Tel: +86 21 5079 1190  
Fax: +86 21 5079 1191  
For a full list of our worldwide office locations, please visit:  
Web: [www.peakscientific.com](http://www.peakscientific.com)  
Email: [discover@peakscientific.com](mailto:discover@peakscientific.com)

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

