

# CG15L Zero Air

Kontinuierliche Zufuhr von Kalibriergas

Artikelnummer: 43-1010 (230V) - UK |  
43-1020 (230V) - EU | 43-1030 (110V) -  
US




## Beschreibung

Viele Laboranwendungen, wie z. B. Luftemissionsanwendungen, erfordern Kalibriergas. Um diese Anforderungen zu erfüllen, hat Peak Scientific den CG15L hergestellt, der keine Luft erzeugt, indem Kohlendioxid, Methan und Feuchtigkeit aus der Luft entfernt werden, für Anwendungen, die eine höhere Leistung als Null-Luft-Modelle erfordern.



## Generator Details

- **Gasarten:** Null-Luft
- **Integrierter Kompressor:** Nein

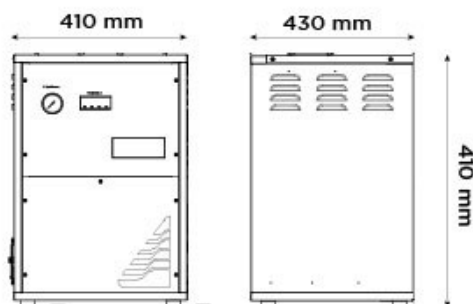

## Hauptmerkmale

- Produziert saubere, trockene Laborluft und sorgt für eine optimale Versorgung der Gasgeneratoren und -instrumente
- Kontinuierliche Zufuhr von Kalibriergas
- Erfüllt die Anforderungen der Federal Register Specification 40CFR 86.114-79
- Wenige bewegliche Teile bedeuten wenig Wartung und gewährleisten eine lange Lebensdauer des Generators
- Im Betrieb völlig geräuschlos
- Kann vom Präzisionsluftkompressor unterstützt werden
- Minimale Einrichtung erforderlich 12 Monate umfassende Vor-Ort-Garantie

## Technische Spezifikationen

### CG15L Zero Air Generator

Gasart	Null-Luft
Maximaler Gasfluss:	15L/min
Maximale Reinheit:	<0.1ppm
Gasanschluss:	1x 1/4" BSP Female
Minimaler Eingangsdruck:	100psi/6,9bar
Maximaler Eingangsdruck:	125psi/8,6bar
Startzeit:	30 mins
Energieverbrauch:	1100/540 W
Stromspannung:	120 / 220 V ±10%
Frequenz:	50 / 60 Hz
Strom:	2.6 / 5.2 A
Akkreditierungen:	CE
Größe (HxBxT) mm	410 x 410 x 430 mm
Größe (HxBxT) Zoll	16,1 x 16,1 x 16,9 inches
Gewicht des Generators	58kg / 127,6lbs

## [PEAK Protected]<sup>TM</sup>

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: [www.peakscientific.com/ordering/](http://www.peakscientific.com/ordering/)
- For service plans visit: [www.peakscientific.com/service/service-plans/](http://www.peakscientific.com/service/service-plans/)

**Peak Scientific UK**  
Tel: +44 (0)141 812 8100  
Fax: +44 (0)141 812 8200

**Peak Scientific North America**  
Tel: +1-800-767-6532  
Fax: +1-978-608-9503

**Peak Scientific China**  
Tel: +86 21 5079 1190  
Fax: +86 21 5079 1191  
For a full list of our worldwide office locations, please visit:  
Web: [www.peakscientific.com](http://www.peakscientific.com)  
Email: [discover@peakscientific.com](mailto:discover@peakscientific.com)

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

