

Infinity 1046

Stickstoffgenerator

Artikelnummer: 3302084




Beschreibung

Der Infinity 1046 erzeugt bis zu 20 l / min Stickstoff und 70 l / min trockene Luft und wurde speziell für die Unterstützung des PerkinElmer QSight Triple Quad entwickelt, unabhängig davon, ob es sich um eine Einzel- / Doppelquellenkonfiguration handelt. Die Infinity-Serie sind kompressorfreie Gasgeneratoren, für deren effektiven Betrieb eine saubere Eigenluftquelle erforderlich ist. Mit sehr wenigen beweglichen Teilen sind diese Generatoren im Betrieb praktisch geräuschlos und benötigen nur minimale Pflege, um eine anhaltend hohe Leistung und eine verlängerte Produktlebensdauer zu gewährleisten.



Generator Details

- **Gasarten:** Stickstoff, Null-Luft
- **Integrierter Kompressor:** Nein

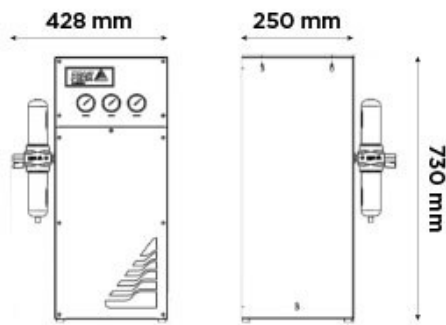

Hauptmerkmale

- Liefert Stickstoff (Trocknungsgas) mit bis zu 20 l / min und Luft (Quellgas) mit bis zu 70 l / min
- Kann sowohl QSight-Modelle mit einer als auch mit zwei Quellen liefern
- 24/7 Betrieb bei optimaler Leistung bei Bedarf
- Hochwirtschaftliche Stickstoff- und Luftquelle mit geringen Betriebskosten
- Minimale Einrichtung erforderlich
- Im Betrieb völlig geräuschlos
- 12 Monate umfassende Vor-Ort-Garantie

Technische Spezifikationen

Infinity 1046 Stickstoffgenerator

Gasart	Stickstoff
Maximaler Gasfluss:	20L/min
Max. Ausgangsdruck:	110psi/7,6bar
Gasart	Null-Luft
Maximaler Gasfluss:	70L/min
Max. Ausgangsdruck:	110psi/7,6bar
Max. Ausgangsdruck:	110psi/7,6bar
Gasanschluss:	2 x 1/4" BSPP
Minimaler Eingangsdruck:	120psi/8,3bar
Maximaler Eingangsdruck:	145psi/10bar
Min Air Inlet Flow:	180
Minimale Zuluftqualität:	ISO8573 - 1:2010 Class 1.4.1
Startzeit:	60 mins
Energieverbrauch:	0
Stromspannung:	n/a
Frequenz:	n/a
Strom:	n/a
Wärmeabgabe:	n/a
Maximale Betriebstemperatur:	30°C / 86°F
Partikel:	<0.01µm
Größe (HxBxT) mm	730 x 422 x 250 mm
Größe (HxBxT) Zoll	28,7 x 16,6 x 9,8 inches
Gewicht des Generators	23kg / 50,6lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

